



Numération des globules rouges



Enseignement
d'Exploration
Biotechnologies

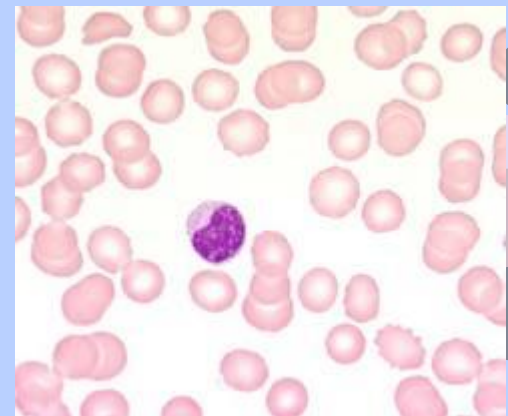

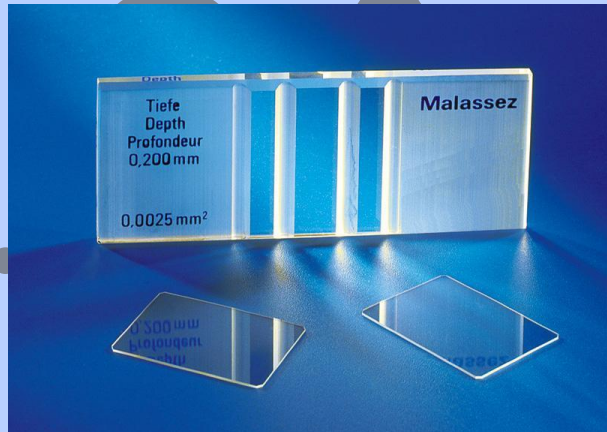

Cellule de Malassez Mesurim®



Hématologie



Cliquer une fois sur l'onglet

« Mesurim »

NUMÉRATION DES GLOBULES ROUGES

SUR CELLULE DE MALASSEZ


ASSISTÉE PAR MESURIM ®

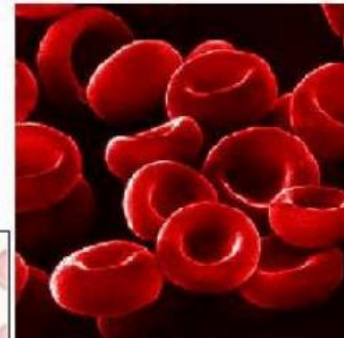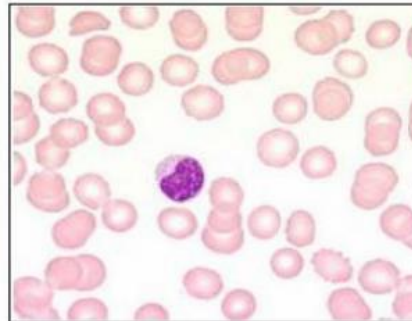


Démarrer

12:06


Cliquer : Fichier/Acquérir

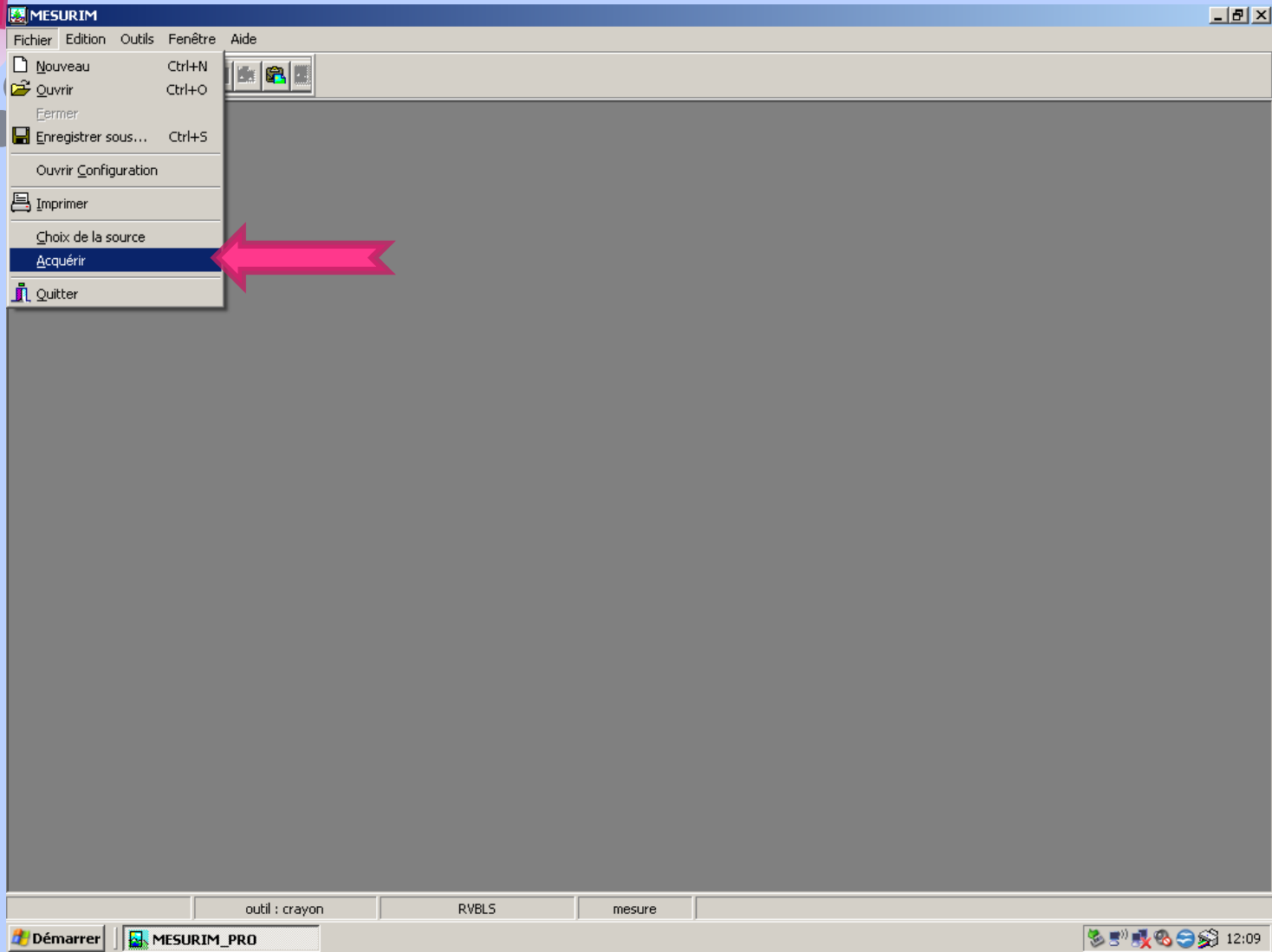


Cliquer sur « Motic Twain » »
Placer un rectangle ABCD
Régler la mise au point, l'éclairage
puis sur « capture » »

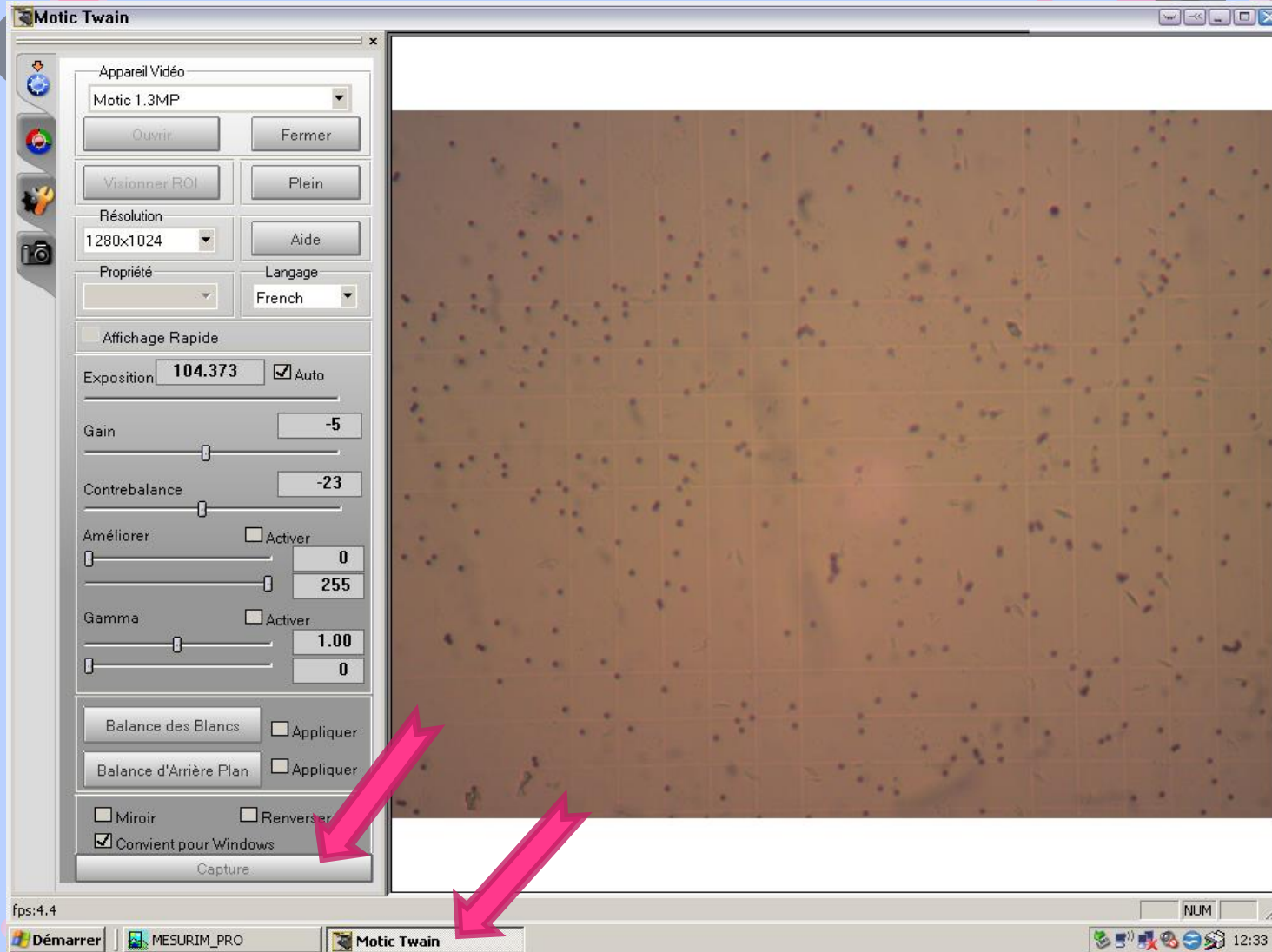


Cliquer sur « OK »

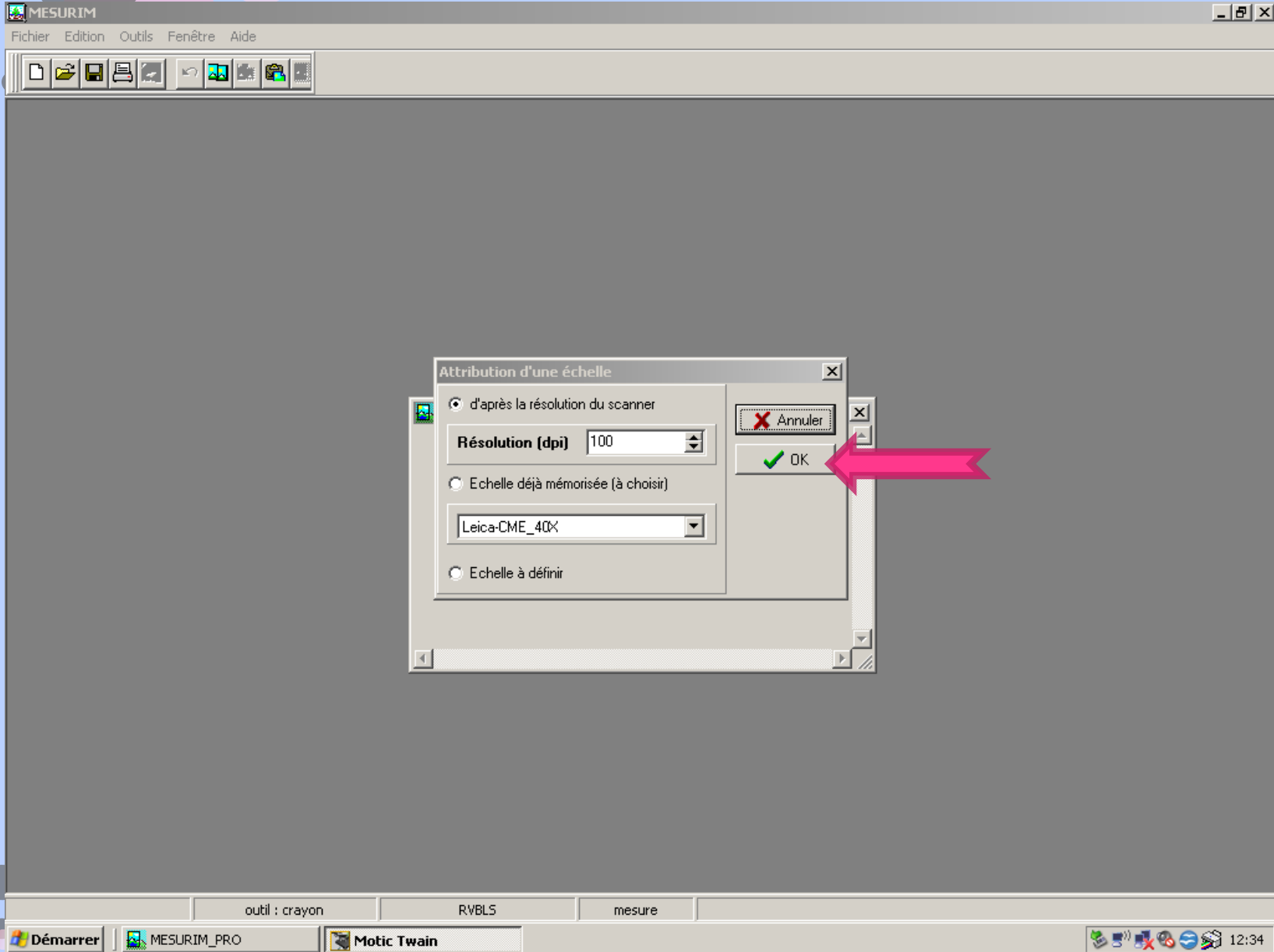


**Cliquer sur l'icône « comptage »
Puis sur chaque **globule rouge** contenue
dans le rectangle ABCD**

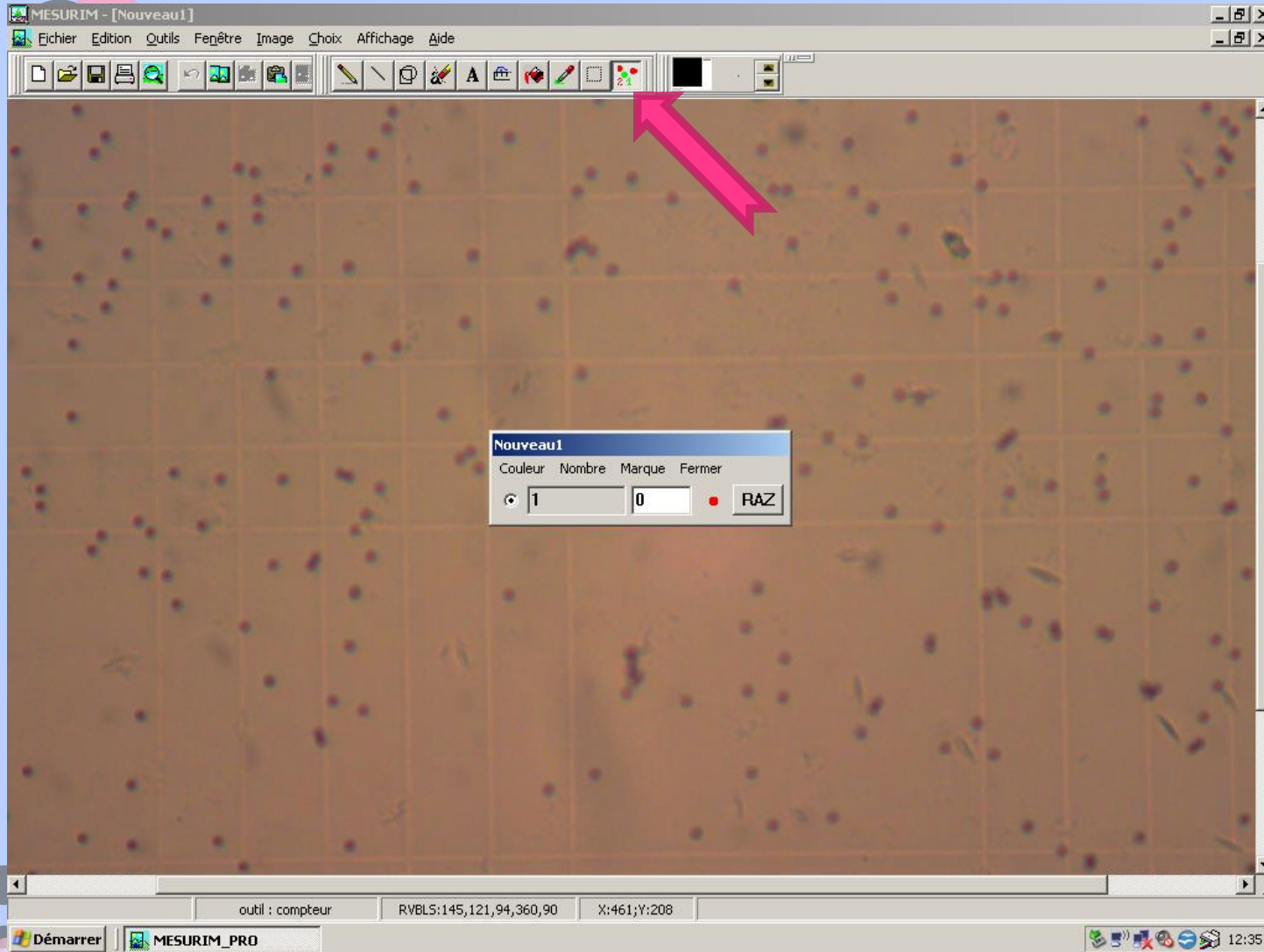


Noter la valeur Cliquer sur « RAZ »

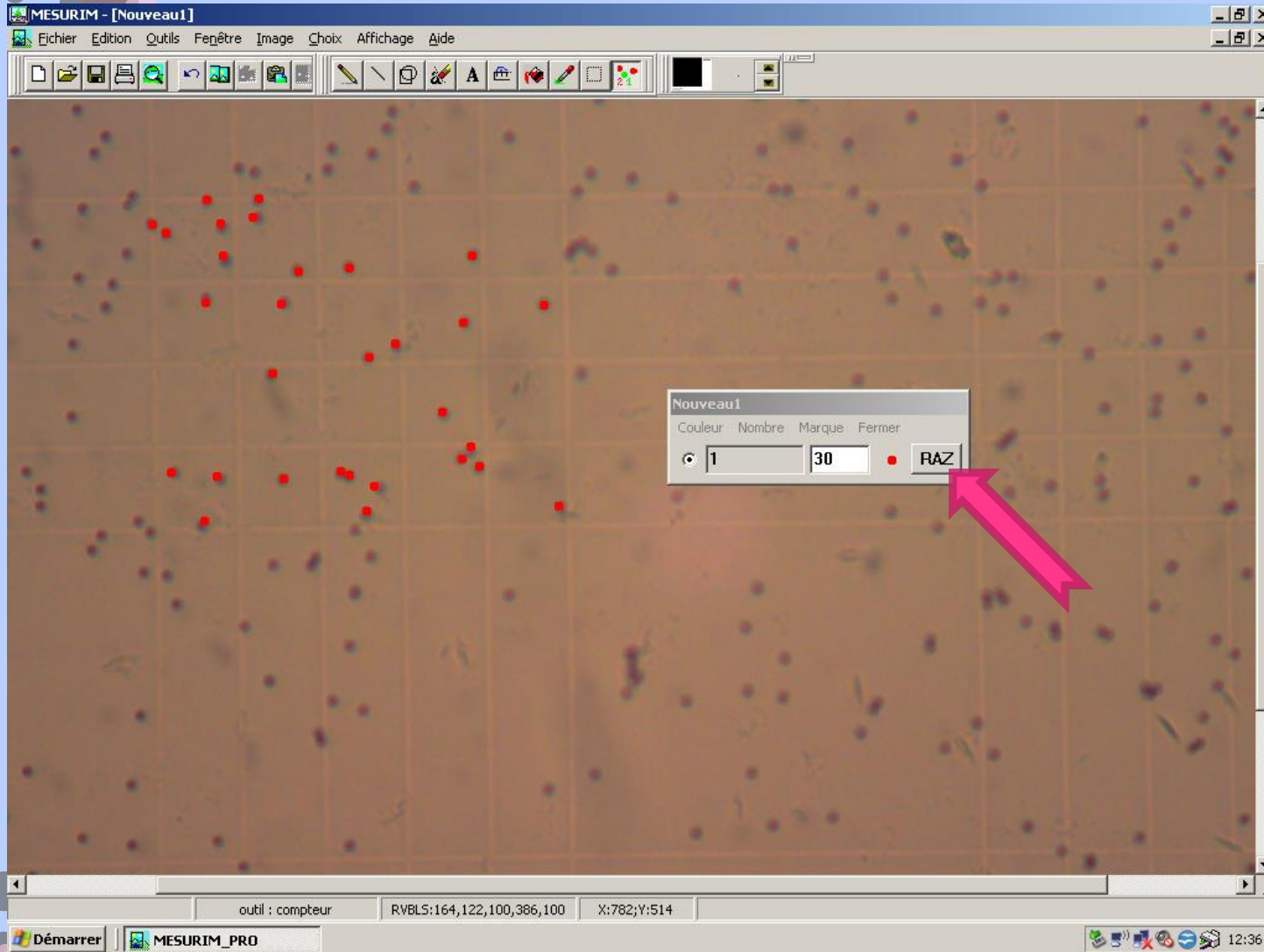

Cliquer sur « Non »

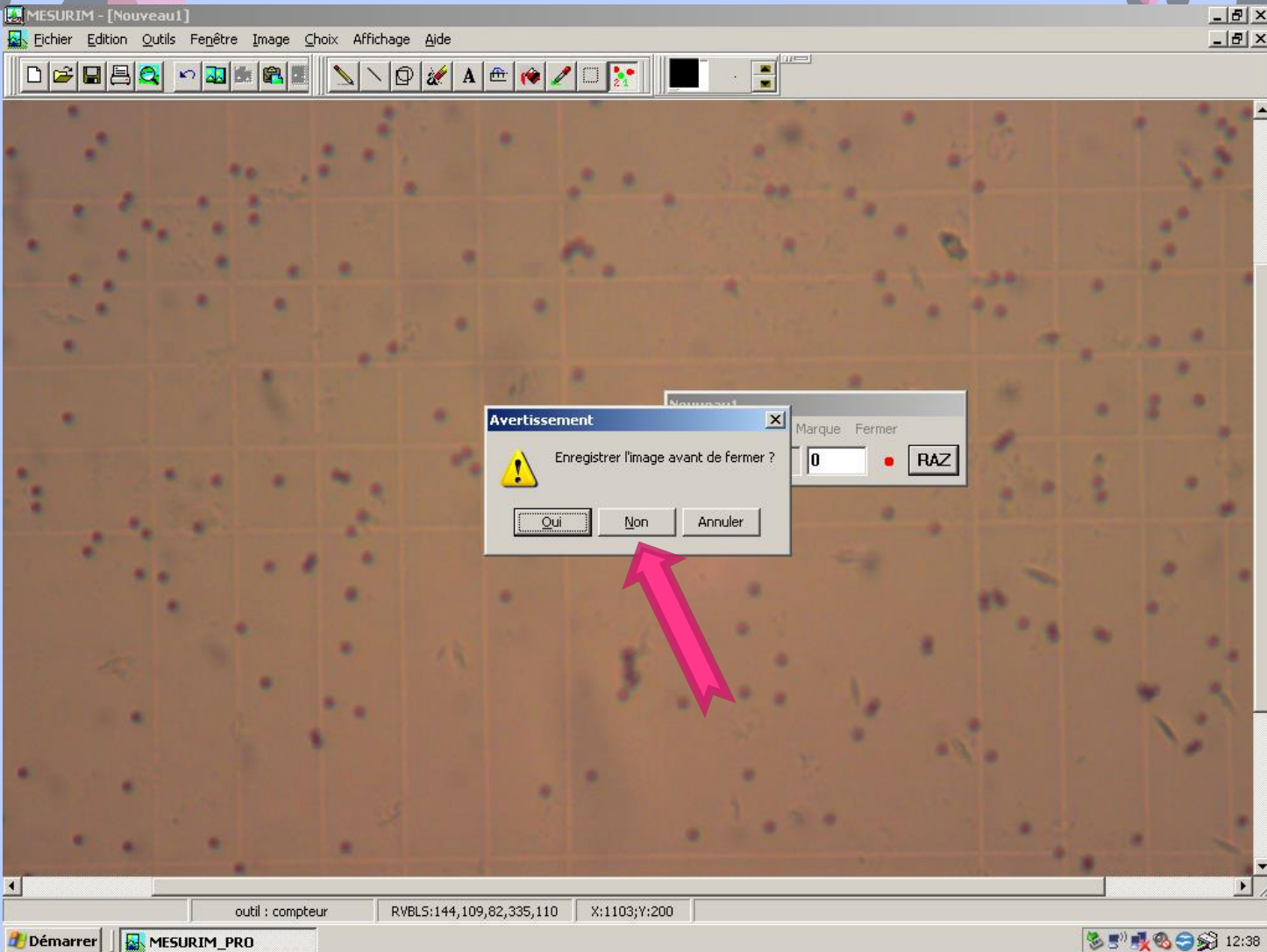

Renouvelez avec un autre rectangle

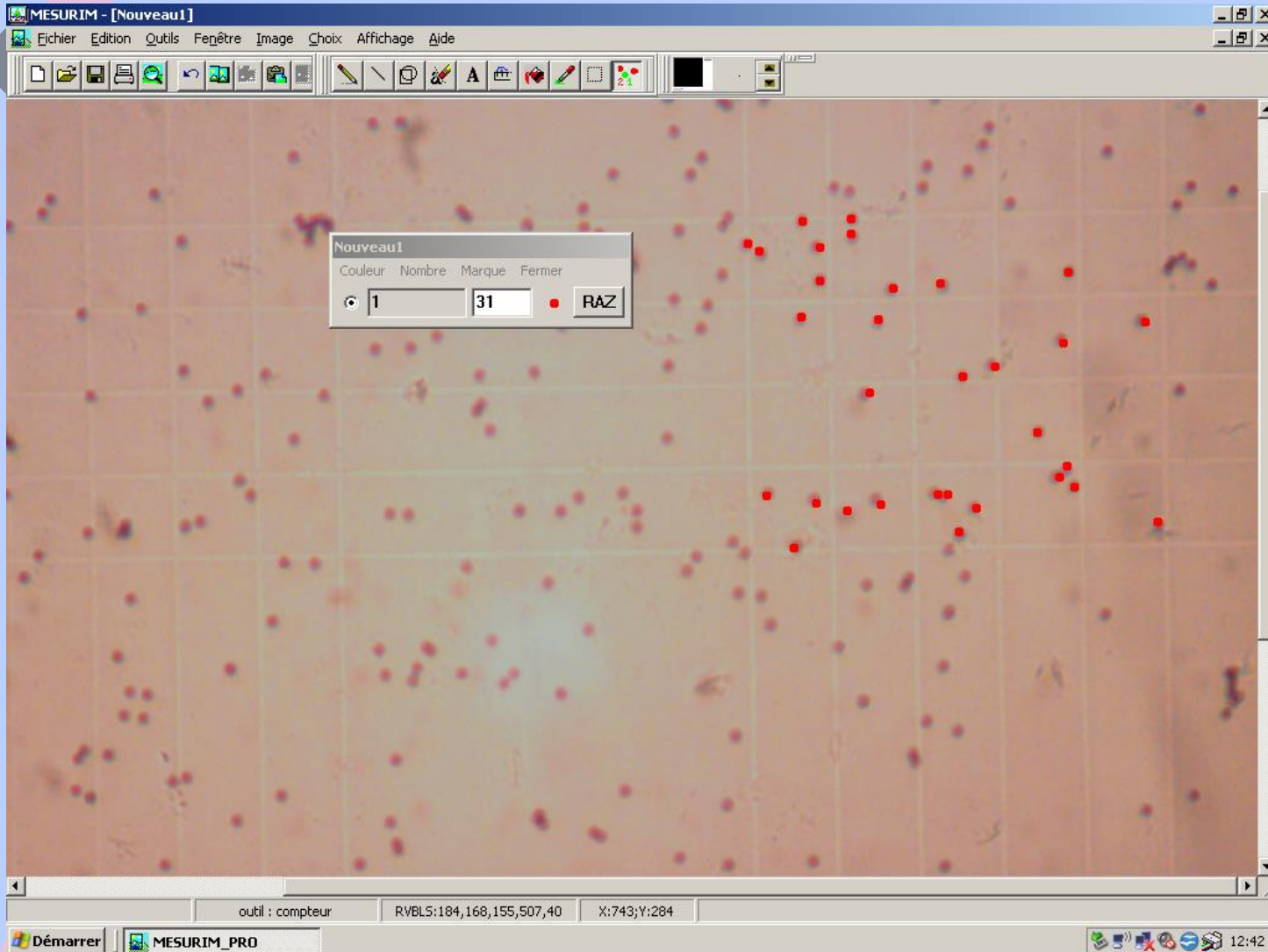

Compter 5 rectangles ABCD

Faire une moyenne

Démontrer et calculer le nombre de **globules rouges** par mm^3

Avez-vous des questions ?

